




Lève-personne de piscine

Sûr, facile à utiliser et polyvalent



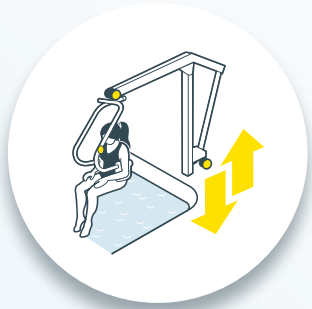

Quel lève-personne pour ma piscine privée ou publique ?

L'accessibilité est un enjeu majeur pour notre société. L'accès aux bassins de nage prend toute sa place dans notre réflexion car la natation est excellente pour la santé physique et mentale de tous. Et lorsque la rééducation se fait dans l'eau, ses bienfaits sont démultipliés.

Mais comment rendre accessible les piscines aux personnes en fauteuil roulant ?

Handi-Move propose des solutions parfaitement adaptées aux besoins des piscines ou des bassins thérapeutiques : entrée et sortie de l'eau, accès aux toilettes, accès aux salles de soins et aux vestiaires. Nos lève-personnes répondent aux exigences légales et normes en vigueur. Ils sont sûrs, rapides et faciles à manipuler par une seule personne.

Les lève-personnes Handi-Move

Les lève-personnes Handi-Move offrent un accès aux bassins de nage, pour un transfert sûr et sans effort. Le lève-personne est composé d'un bras pivotant, d'un châssis-mains, d'une sangle ou d'un siège et d'un système motorisé à télécommande. La personne en situation de handicap passe directement de son fauteuil jusqu'au bassin, sans effort, un accompagnant utilise la télécommande pour réaliser le transfert. Le retour s'effectue de la même manière.

Le lève-personne de piscine mobile est fixé avec un pied ancré dans le sol. L'avantage du lève-personne de piscine est qu'une fois rangé, aucune aspérité ne dépasse du sol. Les personnes valides ne risquent pas de trébucher. Plusieurs points d'ancrage peuvent être prévus pour une utilisation à différents endroits de la piscine. De plus le bras de levage peut pivoter à 360° et soulever jusqu'à 135 Kg.

(Plus d'option au dos...)

~ Lève-personne de piscine avec siège



^ Lève-personne de piscine avec châssis-mains

^ Le lève-personne est déplacé avec son système d'encrage au sol

Lève-personne mural ou lève-personne au plafond

D'autres variantes existent. Semblable au lève-personne de piscine qui est ancré dans le sol, le lève-personne mural est fixé sur un mur ou une colonne prévue à cet effet. La personne en situation de handicap est déplacée grâce à un bras de levage pivotant.

∨ *Lève-personne mural avec châssis-mains*



∧ *Le siège pour lève-personne de piscine s'adapte à tous les fauteuils roulants (de douche)*

Quant au lève-personne au plafond il fonctionne sur un système de rails fixés au plafond. L'avantage est de pouvoir parcourir de plus grandes distances, par exemple un transfert vers le bassin de la piscine puis vers les vestiaires ou la salle de soins, sans avoir à changer de position. Le système de transfert avec rails au plafond peut supporter une charge de 200 Kg.



∧ *Lève-personne au plafond avec châssis-mains*

Transferts indépendants

Transferts indépendants avec le châssis-mains Handi-Move. C'est un gros avantage pour les personnes en fauteuil, qui ont assez d'autonomies pour se déplacer seules dans l'eau, assurer leurs transferts vers les vestiaires ou aller seules aux toilettes. Dans ce cas les transferts se font sans l'aide d'une tierce personne.



Toilettes, vestiaires et espaces de soins

Avec les systèmes de transferts Handi-Move, l'accès aux toilettes n'est plus un problème. Que ce soit dans les piscines publiques ou privées, l'accessibilité est permanente pour les personnes en fauteuil roulant. Les systèmes Handi-Move sont faciles à utiliser et s'adaptent à toutes les configurations architecturales des lieux. Pour cela, votre conseiller Handi-Move se rend dans votre établissement et vous apporte ses précieux conseils et son expérience, afin d'optimiser l'espace disponible.

Les systèmes de transferts Handi-Move facilitent le travail du personnel soignant, en rendant facilement accessibles les salles de soins, les bassins thérapeutiques ou encore les toilettes. Pour les personnes les plus autonomes le châssis-mains Handi-Move peut être utilisé sans l'aide d'une tierce personne.



Références

Vous trouverez ci-dessous différentes utilisations de nos systèmes de transferts Handi-Move.

D'autres exemples sont disponibles sur notre site internet :

www.handimove.fr/solutions/acceder-a-la-piscine



www.handimove.fr



Contacts

Votre partenaire Handi-Move en région se fera un plaisir de vous conseiller.

Toutes nos coordonnées sur :

www.handimove.fr/contact/distributeurs-france

