

# Lève-personne au plafond, portable avec système "tarzan"



Version adaptée du moteur portable pour des pièces adjacentes:  
la solution pour passer les portes




- Le système "tarzan" : version modifiée du moteur portable, pour le transfert entre deux pièces avec une porte classique.
- Pas de travaux pour passer les portes.
- Peut être utilisé dans différentes pièces équipées de rails (lit, bain, toilette, douche, table de soins...).
- Fonctionne avec un châssis-mains ou une sangle.
- Léger, compact et puissant : il peut soulever jusqu'à 182 kg.
- Economique : un seul moteur pour plusieurs transferts.
- Design élégant et intemporel.

Systèmes de transfert et de soins pour les personnes à mobilité réduite

# Lève-personne au plafond moteur portable avec système "tarzan"



## ● Dimensions

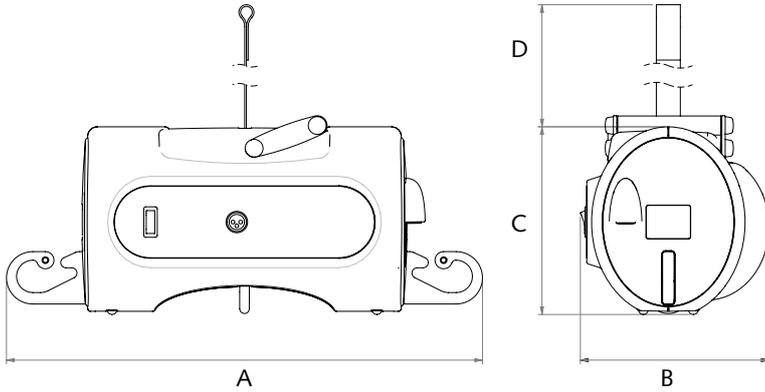

A	480 mm
B	200 mm
C	210 mm
D	1550 mm

## ● Spécifications techniques

Poids: ..... 8 kg  
 Charge maximale:..... 182 kg  
 Batteries: ..... 2 x 12 VDC/3.2 Ah.  
 Chargeur .....input 220 V AC / output 24 V DC  
 Nombre de levées avec batteries entièrement chargées:..... 50 x avec 100 kg sur une distance de 50 cm  
 Recouvrement du moteur: ..... ABS  
 Descente d'urgence: ..... Electrique  
 Rails :.....Aluminium, laqués en blanc

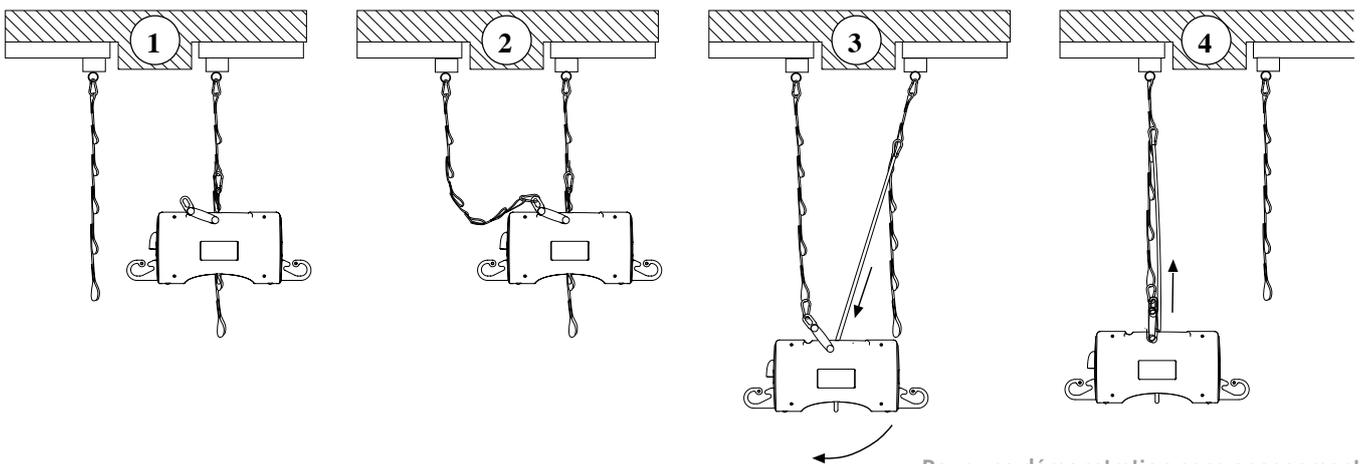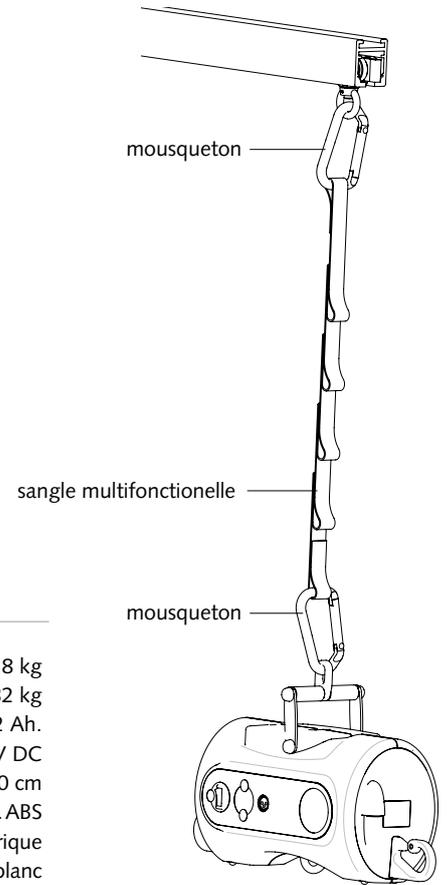

## ● Avec les sangles ou le châssis-mains

Grâce aux poignées intégrées et au crochet de fixation, vous pouvez utiliser le moteur soit avec les sangles soit avec le châssis-mains.

Pour une démonstration sans engagement et de plus amples renseignements

